



Pokyny pre odber a odoslanie vzorky

ZENTYA

Distribútor a poskytovateľ služby:

Zentya, a.s.
Grösslingova 4
811 09 Bratislava
Slovensko
mobil: + 421 915 842 336
mail: colotect@zentya.sk
web: www.colotect.sk
Facebook: ColoTect Slovensko
Instagram: colotect_slovensko



Laboratórium lekárskej genetiky:

MedGene s.r.o.
Ondrejovova 30
821 03 Bratislava
Slovensko
telefón: +421 2 20737474
mail: info@medgene.eu
web: www.medgene.eu

ODBEROVÁ SADA OBSAHUJE (1)

1. Plastová lyžička na odber vzorky.
2. Skúmavka na odber vzorky s ochrannou tekutinou vo vnútri.
3. Dva papiere na odber vzorky.
4. Vrecko na biologický materiál. (BIOHAZARD)
5. Obálka s označením UN3373.
6. Spätná obálka na zaslanie vzorky.
7. Prepravné listy s čiarovými kódmi - 2x.

Obrázok 1




PRÍPRAVA PRED ODBEROM:


- **Vyplňte a podpíšte Žiadosť o vykonanie testu** a prečítajte si Formulár informovaného súhlasu uvedený na ZADNEJ STRANE formulára Žiadosti o vykonanie testu.
- **Na odberovú skúmavku napíšte paličkovým písmom Vaše meno, priezvisko a dátum odobratia vzorky.**
- Odber vzorky ideálne realizujte v deň, keď ju budete môcť odoslať do 48 hodín po odbere.
- Na odber je najvhodnejšia ranná stolica hneď po prebudení. Ak to nie je možné, môžete odobrať vzorku aj v inú dennú hodinu.
- Roztok na konzerváciu vzorky nevyliievajte z odberovej skúmavky!

1. UMIESTNITE PAPIER NA ODBER VZORKY NA TOALETU


- zdvihnite veko a sedadlo toalety, (2)
- naskladajte toaletný papier do misy, aby bol nalepený papier izolovaný od vody, a taktiež aby zbrzdil stolicu, ak je ťažká,
- vyberte papier na odber vzorky, (3)
- odstráňte ochranné fólie z papiera na odber vzorky, aby ste odkryli lepiace prúžky tak, ako to je znázornené na obrázku, (4)
- lepiace prúžky papiera na odber vzorky priložte na okraj toalety a prilepte ich, (5)
- ! zaistite, aby bol papier na odber vzorky prehnutý smerom dolu, aby zostal dostatočný priestor na odber vzorky a aby stolica nedosahovala až k Vášmu telu,
- ! skontrolujte, či sa papier na odber vzorky nedotýka vody v toalete,
- ! kľúčové je nemiešať odoberanú vzorku s močom (vymočte sa pred odberom), toaletným papierom (nehádzajte toaletný papier na vzorku) alebo odpadovou vodou (splasškami),
- spustite sedadlo toalety na papier pre odber vzorky. (6)

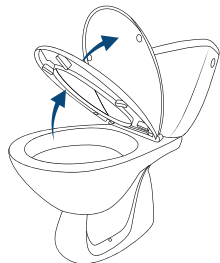


Obrázok 2

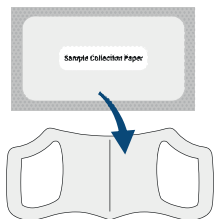


Obrázok 3

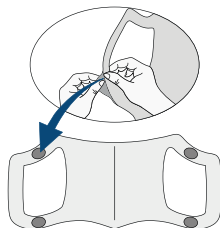

Obrázok 4

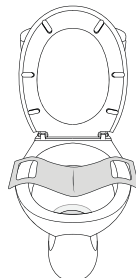

Obrázok 5

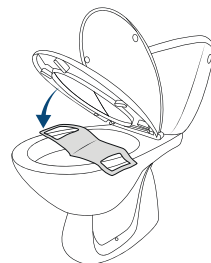


Obrázok 6

2. VYKONAJTE VEĽKÚ POTREBU


- sadnite si na toaletu a vyprázdnite sa na papier na odber vzorky,
- skontrolujte, či papier na odber vzorky zachytil vzorku stolice.

3. UMIESTNITE ODBEROVÚ SKÚMAVKU DO STOJANA


- zatvorte súpravu na odber vzorky (papierovú krabicu), na hornej strane veka nájdite kruh označený ako stojan na skúmavku, (7)
- vezmite odberovú skúmavku, uprostred kruhu urobte otvor a umiestnite odberovú skúmavku do stojana uzáverom smerom nahor, (8)
- skúmavku otvorte otočením uzáveru proti smeru hodinových ručičiek, v prípade potreby podržte skúmavku druhou rukou. (9)

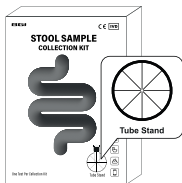

Obrázok 7

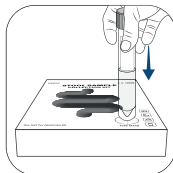

Obrázok 8

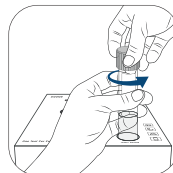


Obrázok 9

4. ODOBERTE VZORKU


- použité odberovú lyžicu a odoberiete jednu plnú lyžicu vzorky stolice z dvoch, alebo troch rôznych miest na povrchu stolice, (10)
- lyžičku so vzorkou stolice vložte do odberovej skúmavky, ktorá je umiestnená v stojane na skúmavku, lyžičku zatlačte ku dnu odberovej skúmavky tak, aby sa vzorka úplne ponorila do ochrannej kvapaliny a zatlačte na hornú časť rukoväte lyžičky (ako stlačenie guľôčkového pera), aby došlo k oddeleniu lyžičky od rukoväte, (11)
- rukoväť lyžičky opatrne vytiahnite z odberovej skúmavky, rukoväť lyžičky môžete vyhodiť do koša. (12)

5. UZATVORTE ODBEROVÚ SKÚMAVKU A SPLÁCHNITE TOALETU


- skúmavku uzavrite otáčaním uzáveru v smere hodinových ručičiek, (13)
- **! ak by uzáver nebol správne nasadený a dotiahnutý, mohlo by dôjsť k vytekaniu obsahu zo skúmavky a znehodnoteniu vzorky,**
- opatrne vytiahnite uzatvorenú odberovú skúmavku zo stojana, (14)
- spláchnite toaletu spolu s papierom na odber vzorky. (15)

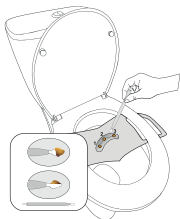


Obrázok 10

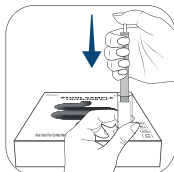


Obrázok 11

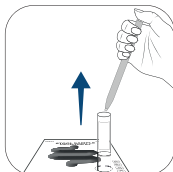


Obrázok 12

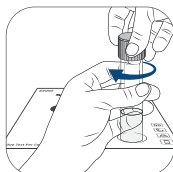

Obrázok 13

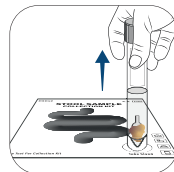


Obrázok 14

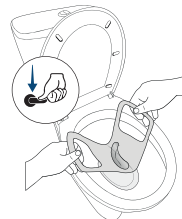

Obrázok 15

- skontrolujte, či máte na odberovej skúmavke napísané Vaše meno, priezvisko a dátum odobratia vzorky,
- odberovú skúmavku vložte do vrečka na biologický materiál (Biohazard), (16)
- vrečko na biologický materiál (Biohazard) uzatvorte, vložte ho do obálky s označením UN3373 a túto vložte do spätnej obálky, (17)
- **!!! pošlite scan/fotku vyplneného a podpísaného formulára Žiadosti o vykonanie testu na mailovú adresu: colotect@zentya.sk, prípadne poštou, po dohode s nami,**
- vyplnený a podpísaný formulár Žiadosti o vykonanie testu vložte do spätnej obálky a obálku uzatvorte,
- pripravte si 2 hárky prepravných listov s čiarovými kódmi, ktoré odovzdáte kuriérovi spolu so spätnou obálkou, **!prepravné listy nevkladajte do spätnej obálky,**
- **kontaktujte nás** na +421 911 592 302 alebo na +421 915 842 336 alebo na colotect@zentya.sk, **zabezpečíme Vám zvoz vzorky do laboratória.**

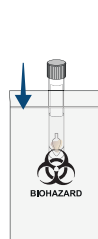

Obrázok 16



Obrázok 17



! Zaistite, aby vzorka stolice bola odovzdaná kuriérovi do 48 hodín po odbere.

! Vzorku uchováajte a prepravujte pri izbovej teplote.

! V prípade potreby volajte +421 911 592 302 alebo na +421 915 842 336 alebo píšete na colotect@zentya.sk.

VŠEOBECNÝ NÁZOV VÝROBKU

Súprava na odber vzorky stolice

VEĽKOSŤ BALENIA

Jeden test na jednu odberovú súpravu

ÚČEL POUŽITIA

Táto odberová súprava je určená na odber, prepravu a skladovanie vzoriek ľudskej stolice. Nie je automatizovaná. Súprava je určená na to, aby ju laik použil na odber a zaslanie vzorky stolice do klinického laboratória na diagnostické vyšetrenie in vitro.

PRINCÍP PROCEDÚRY

Tento výrobok je určený na odber, prepravu a skladovanie vzoriek ľudskej stolice. Konzervačná tekutina v skúmavke obsahuje < 30% roztok chloridu sodného (NaCl) a ďalšie zložky. Ochranný roztok môže inhibovať degradáciu DNA a inhibovať rast baktérií upravením pH a vysokým obsahom iónov soli.

ODBEROVÁ SÚPRAVA OBSAHUJE POLOŽKY:

VŠEOBECNÝ NÁZOV	Počet	Popis
Formulár Žiadosť o vykonanie testu a Informovaný súhlas	1	1 obojstranný list/formulár
Pokyny pre pacienta	1	Pokyny pre odber a odoslanie vzorky/brožúra
Plastová lyžička na odber vzorky	1	Lyžička má odnímateľnú rukoväť
Papiere na odber vzorky	2	/
Odberová skúmavka	4 ml ochrannej kvapaliny v skúmavke, 1 odberová skúmavka	Ochranná kvapalina v skúmavke obsahuje < 30% roztok chloridu sodného (NaCl)
Vrečko na biologický materiál (BIOHAZARD)	1	/
Obálka s označením UN3373	1	/
Spätná obálka	1	Spätná obálka na zaslanie vzorky
Prepravné listy	2	Odvodzávajú sa kuriérovi

SKLADOVANIE ODBEROVEJ SÚPRAVY A DOBA SKLADOVANIA PRED POUŽITÍM

Súpravu na odber vzorky stolice uchovávajúte pri teplote od 2°C do 30°C. Skladovateľnosť výrobku je do dátumu expirácie. Skontrolujte, či súprava nemá uplynutú dobu použiteľnosti. Skontrolujte, či bola odberová skúmavka pri dodaní uzavretá. Po otvorení skúmavky vydrží konzervačná tekutina 6 mesiacov pri skladovaní pri teplote od 2°C do 30°C. Súpravu uchovávajúte mimo tepelných zdrojov a nevystavujte ju priamemu slnečnému žiareniu. Zaistite, aby bola súprava uchovávaná mimo dosahu detí.

UCHOVÁVANIE ODBEROVEJ SÚPRAVY PO POUŽITÍ

Odobratú vzorku stolice odošlite do 48 hodín po odbere. Vzorka sa musí vyšetriť v laboratóriu najneskôr do 7 dní odo dňa odberu, vrátane času vyhradeného na prepravu vzorky; tieto podmienky platia pre vzorky, ktoré boli uchovávané a prepravované pri teplote od 2°C do 30°C.

SKLADOVANIE VZORKY PO DORUČENÍ DO TESTOVACIEHO LABORATÓRIA

Vzorku je možné uchovávať pri izbovej teplote 7 dní po odbere, vrátane času určeného na prepravu vzorky. Po 7 dňoch sa vzorka musí skladovať v laboratóriu pri nízkej teplote (pod -20 °C) najviac 12 mesiacov.

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Tento výrobok sa nedá používať opakovane.
- Tento výrobok je určený iba na odber, prepravu a skladovanie vzorky stolice.
- Tekutina v odberovej skúmavke nie je určená na konzumáciu. Ak ste ju prehltili, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa tekutina dostane do očí, alebo na pokožku, opláchnite ju vodou.
- Kvapalinu z odberovej skúmavky nevyliievajte!
- Odberovú súpravu uchovávajúte mimo dosahu detí.

Údaje o výrobcovi testu

Výrobca: BGI Europe A/S.

Adresa výrobcu: Die Maaløes Vej 3, DK-2200 Kodaň, Dánsko.

Kontaktné informácie

Kodaň, Dánsko: 0045-80300800/ 0045-70260806

Web stránka: www.bgi.com/global

Výrobný závod

BGI Biotechnology (Wuhan) Co., Ltd.

Adresa výrobného závodu

Building B2, B1, Zone B/C/D, Wuhan National Bioindustry Base, No.666 Gaoxin, Avenue, East Lake High-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430075, Čína.

CE	OZNAČENIE CE
	Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro
	Výrobca
	Obsah postačuje na <n> testov
	Teplotný limit
	Dátum výroby
	Dátum použiteľnosti
	Katalógové číslo
	Kód šarže
	Preštudujte si návod na použitie
	Nepoužívajte opakovane
	Chrňte pred slnečným žiarením
	Uchovávajúte v suchom prostredí